

OLYMPUS[®]

Your Vision, Our Future

Faca eletrocirúrgica ITknife2™

Versatilidade de corte com o mínimo de invasividade.



ITknife2™ KD-611L


Obtenha a versatilidade de corte com a ITknife2. Seu eletrodo exclusivo no lado proximal da ponta cerâmica isolada foi projetado para ajudar a minimizar a invasividade de corte enquanto maximiza as capacidades de corte nas direções vertical e horizontal.

Características & Benefícios

- 1 Ponta cerâmica**
A ponta cerâmica na extremidade distal deste dispositivo é isolada para ajudar a realizar incisões e disseções de forma mais eficaz, sem atingir áreas mais profundas da mucosa.
- 2 Projeto inovador de eletrodo**
O eletrodo no lado proximal da ponta cerâmica foi projetado para fornecer desempenho de corte excepcional nas direções vertical e horizontal.

Especificações

| | |
|--------------------------------|--------|
| Diâmetro da porção de inserção | 2.6 mm |
| Comprimento da faca de corte | 4.0 mm |
| Diâmetro da faca de corte | 0.4 mm |
| Comprimento do eletrodo | 0.7 mm |
| Diâmetro da ponta | 2.2 mm |

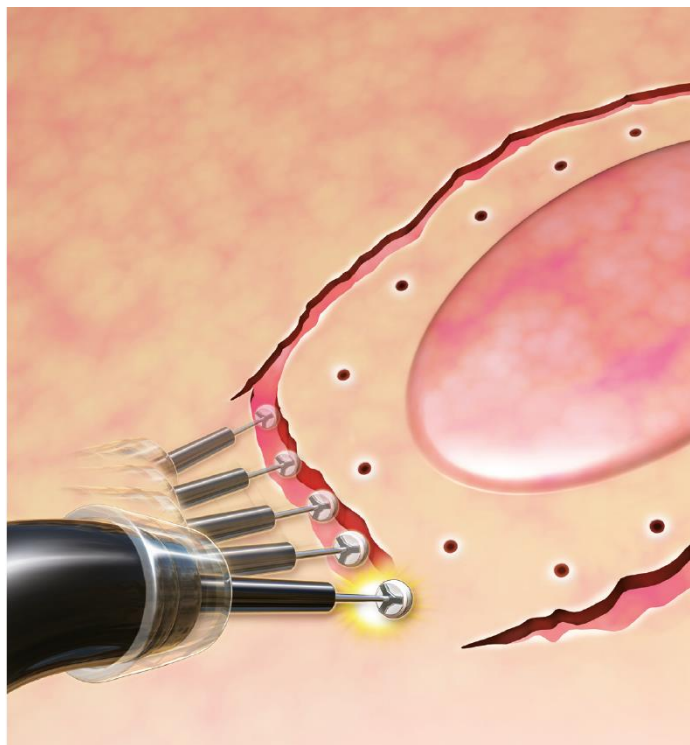

Técnica

Após a incisão inicial, use a ITknife2 para concluir um corte circunferencial ao redor da lesão. Faça isso puxando o dispositivo na direção que deseja cortar. Para instruções de operação detalhada, siga o Manual de instruções KD-611L incluído com a sua ITknife2 quando adquirida.

Total de Soluções

- 1 Cap Distal**
Mantém um campo de visão ideal usando o cap distal.
- 2 Controle da hemostasia**
A Olympus oferece uma linha completa de produtos de hemostasia para tratar complicações hemorrágicas. Considere os cliques hemostáticos QuickClip 2 da Olympus, a Coagrasper e as agulhas de injeção InjectorForce Max™.

Declaração de Prevenção

Antes de usar, leia atentamente o manual e use o produto conforme indicado. Esses instrumentos foram projetados para uso por médicos ou equipe médica sob a supervisão de um médico.

Em certos casos, o uso desses instrumentos pode levar a perfuração ou sangramento e pode exigir intervenção cirúrgica como medida de emergência. Use este produto somente se você tiver recebido treinamento adequado para desenvolver um entendimento da aplicação clínica e do uso adequado deste produto.

LCR - 2009008

Olympus, ITknife2, Coagrasper, QuickClip2 e InjectorForce Max são marcas registradas da Olympus Corporation, Olympus America Inc. e/ou suas afiliadas.

OLYMPUS

OLYMPUS AMERICA INC.
3500 Corporate Parkway, PO Box 610, Center Valley, PA 18034

Para obter mais informações, entre em contato com o seu representante de vendas da Olympus.
www.medical.olympusamerica.com

©2013 Olympus America Inc. Todos os direitos reservados.
Impresso nos EUA OAIET0813BRO11520